

FYSIC[®] FC-55



Pastillero electrónico con alarma.

Introducción:

En el pastillero Fysic FC-55 puede almacenar cinco medicamentos. Puede programar hasta 5 alarmas diarias, cuando una alarma suena, la pantalla muestra qué medicamentos tomar.

El programa se repite diariamente hasta que establezca diferentes alarmas.

Las cajas de pastillas FC-55 sólo son adecuados para los medicamentos secos (píldoras, cápsulas y similares), no para las bebidas o ungüentos.


Alimentación:

El FC-55 está alimentado por dos baterías:

Una pila de botón de litio CR2025 para el reloj y la función de temporizador. Esta batería está instalada en fábrica pero que aún no está en uso gracias a una tira protectora.

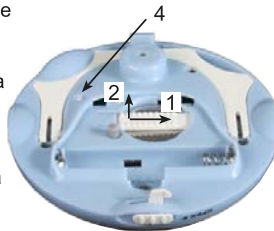
Además, una batería de 1,5 V (tamaño AAA) para el sonido, la vibración de alarma y la iluminación de la pantalla. Esta batería no es incluida. Utilice una pila alcalina, no recargable.

Primer uso:

1. Utilice el control deslizante  para abrir el FC-55
2. Retire la tapa de la batería
3. activar el botón de la batería tirando de la placa de aislamiento de la FC-55
4. colocar una batería alcalina de 1,5 V, tenga en cuenta la polaridad (+ y -)

Reemplazar la batería de botón:




1. deslice el puente blanco hacia la derecha de forma que salga por la izquierda
2. Tome este puente y vuelva a colocar la pila de botón (el + hacia arriba)
3. coloque el puente gire a la derecha en la apertura, presione hacia abajo y deslícelo hacia la izquierda hasta fijarlo
4. presionar 1 vez el botón **RESET** y ajustar el reloj y la alarma nuevamente




Las baterías agotadas no pueden ser colocados en la basura doméstica, debe eliminarlas como un desecho peligroso.





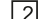
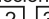
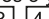
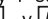
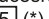

Ajustar:

reloj:

1. desbloquear las teclas del interruptor deslizante  hacia la izquierda
2. presionar  durante 2 segundos, las horas parpadearan
3. gire el anillo blanco para cambiar las horas
4. presionar de nuevo , los minutos parpadearan






5. gire el anillo blanco para cambiar los minutos
6. pulsar brevemente  para fijarlo.

horas de alarma:

1. desbloquear las teclas del interruptor deslizante  hacia la izquierda
2. pulsar en  durante 2 segundos. La alarma  comenzara a parpadear
3. gire el casquillo blanco alrededor para ajustar la hora de alarma del primer medicamento del día, se puede establecer la hora de alarma por media hora
4. pulsar de nuevo , la alarma  comenzara a papadear.
5. repita las instrucciones 3 y 4 sucesivamente con las alarmas , ,  y  (*)
6. pulsar brevemente  para fijar las alarmas



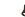
*: Si usted necesita usar de menos de 5 alarmas gire el anillo alrededor hasta que aparezca en la pantalla el simbolo - : - , entonces esta alarma está desactivada.


cambio de alarmas:

1. desbloquear las teclas del interruptor deslizante  hacia la izquierda
2. pulsar en  durante 2 segundos. La alarma  comenzara a parpadear
3. pulsar sobre  hasta que la alarma que deseamos cambiar, parpadee.
4. gire el casquillo blanco alrededor para establecer la nueva hora de alarma (*)
5. pulsar brevemente varias veces  la nueva alarma quedara fijada



*: Para eliminar completamente una hora de alarma, gire el anillo alrededor hasta que aparezca en la pantalla el simbolo - : - , entonces esta alarma está desactivada.

señal de alarma:

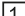

Utilice el control deslizante    para establecer el tipo de alarma deseado. Este ajuste también se muestra en la pantalla:

: la alarma sonará durante 30 segundos con un sonido agudo.


: el pastillero vibrará durante 30 segundos

+: la alarma suena durante 30 segundos alternando un sonido agudo y haciendo vibrar el pastillero.



Medicamentos en el pastillero:

1. girar la tapa transparente hasta dejar al descubierto el compartimento 1
2. llenar esta casilla con los medicamentos que está tomando, el primero corresponde a la alarma 
3. girar la tapa de nuevo hasta el compartimento 
4. repetir, si es su caso, para los compartimentos 3, 4 y 5.
5. Finalmente, girar la tapa a la posición de partida (los 5 compartimentos están cerrados)

Funcionamiento:

Cuando se alcanza la hora de alarma, el pastillero vibrará/sonará o vibrará y sonará alternativamente durante un máximo de 30 segundos, la luz y el símbolo  se encenderán en la pantalla.

si no te das cuenta de la alarma, la alarma se repetirá 2 veces después de 5 minutos, después de esto, junto a la hora de la alarma 2 puntos parpadearán indicando que la alarma no ha sido vista.

cuando se pulsa el sobre el botón  o  la alarma se detiene, pero volverá a sonar pasados 5 minutos





si abre el compartimento de los medicamentos la alarma se detiene y cambia la hora de la alarma por -:--

incluso si lo utiliza durante los 15 minutos anteriores a la alarma programada, esa alarma desaparece y cambia a -:--

El FC-55 asume que usted ha tomado su medicamento y apaga la alarma para hoy.


rearme automático: cada día a las 00:13 horas se restablecen sus alarmas y los tiempos programados aparecen de nuevo. Su pastillero está listo para un nuevo día.

Medición de la frecuencia cardíaca:



1. desbloquear las teclas del interruptor deslizante  hacia la izquierda
 2. pulsar el botón , y el símbolo  aparecerá en su pantalla.
 3. coloque su dedo índice sobre el sensor (cubriendo el sensor completamente) entonces el símbolo  parpadeará
 4. después de 15 a 60 segundos, suena un pitido y el ritmo cardíaco aparece en la pantalla
- Después de unos segundos, la pantalla vuelve a la visualización de la hora.



Bloqueo del teclado:

Deslice el interruptor lateral del pastillero  en el sentido de la flecha para bloquearlo y no cambiar la configuración accidentalmente.

Luz de fondo:

1. desbloquear las teclas del interruptor deslizante  hacia la izquierda
2. pulse brevemente la tecla  la pantalla se ilumina durante 10 segundos.


Soporte reloj:

Puede usar el soporte de su pastillero para usarlo como un reloj / alarma de mesa.



Rearme manual:


En el supuesto de que su FC-55 necesite un rearme, actúe de la siguiente forma

1. Utilice el interruptor deslizante  de su FC-55 para abrirlo
2. pulse el botón **RESET** con un objeto puntiagudo brevemente
3. Después de unos segundos, el FC-55 se restablece



Tenga en cuenta que tanto el reloj como todas las alarmas están borradas y deben ser reprogramadas.

Servicio:

- Si la alarma no suena o es débil y la luz de fondo no funciona, cambiar la pila AAA de 1,5V.
- Si la lectura de la pantalla del reloj y las horas programadas lucen débilmente, sustituya la pila de botón.
- En caso de un supuesto fallo pulse el botón **RESET** para reestablecer su pastillero.
- Tenga en cuenta que la tecla  puede haberse desplazado a la derecha
- Si el problema persiste a pesar de esto, consulte el servicio técnico Fysic

Declaración de conformidad:

El Fysic FC-55 cumple con los requisitos y disposiciones esenciales definidos en la Directiva Europea 1999/5/CE.

La declaración de conformidad está disponible en el sitio web WWW.FYSIC.COM

